

DCI edge



ÉQUIPEMENT OPÉRATOIRE DCI EDGE SÉRIE 5

CÉLÉBRATION DES 40 ANNÉES DE LA PASSION ET DES PROMESSES

DCI est une entreprise familiale multigénérationnelle établie à Newberg, en Oregon. Nous croyons en la gestion de tous les aspects de l'entreprise autour d'un seul objectif simple : **faciliter la vie de nos clients.**

Cette priorité a fait de DCI Edge la marque d'équipement dentaire qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Notre passion est de concevoir et de construire le meilleur équipement dentaire de l'industrie. Notre promesse est une fabrication parfaitement axée sur la fiabilité et la valeur optimale.

UNE FABRICATION FORTE DE DÉCENNIES D'EXPÉRIENCE

DCI edge




FAUTEUIL REVÊTEMENT ULTRALEATHER^{MC} AGRUME

844 854-8555 | dciedge.com



LIBERTÉ FINANCIÈRE

C'est votre pratique. C'est votre budget. Ne vous fermez aucune porte. DCI Edge vous offre tout l'équipement dont vous avez besoin à un prix qui vous permet d'optimiser la conception et la fonction de votre salle de traitement sans compromettre la qualité.

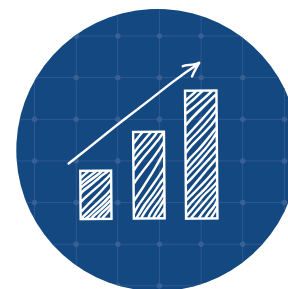

RÉINVESTIR

Améliorez votre pratique avec les technologies les plus récentes et les plus avancées, et cimentez votre avantage dans le monde de la technologie en constante évolution.



ÉCONOMISER

De l'argent supplémentaire en banque offre une certaine tranquillité d'esprit. Épargnez pour une journée pluvieuse ou pour votre régime de retraite.



CHOIX


Choisissez où attribuer vos fonds pour faciliter votre vie et assurer le bon fonctionnement de votre clinique.

INSTALLEZ-VOUS CONFORTABLEMENT RESTEZ EN SANTÉ



ERGONOMIE

Le dossier mince et étroit et l'appui-tête à double articulation permettent un positionnement idéal pour le prestataire et le patient, assurant un confort et une efficacité accrus pour toute l'équipe de soins dentaires.

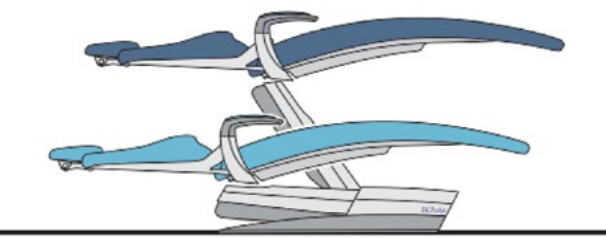

ASSIS OU DEBOUT?

La hauteur du fauteuil de série 5 s'ajuste entre 16 et 31 po pour vous permettre de travailler confortablement en position assise ou debout.

ACCÈS À LA CAVITÉ ORALE

Le dossier profilé unique assure un accès complet entre les positions de travail à 3 et 9 heures tout en soutenant confortablement le patient.



FAUTEUIL ET
TABOURET DE
SÉRIE 5

REVÊTEMENT ULTRALEATHER
ÉTAIN NACRÉ



FAUTEUIL ET
TABOURET

REVÊTEMENT ULTRALEATHER ABRICOT



ÊTES-VOUS DANS LA BONNE POSITION?

Un positionnement optimal près du patient assure une posture saine, réduisant la douleur et la fatigue.

UN CONFORT QUI GARDE LES PATIENTS SOURIANTS



FAUTEUIL ET
TABOURET

REVÊTEMENT ULTRALEATHER ABRICOT



FAUTEUIL

REVÊTEMENT ULTRALEATHER BAYOU



DOSSIER ERGONOMIQUE REMBOURRÉ

SOUTIEN DU PATIENT

Le coussin dorsal et l'appuie-tête profilé novateurs offrent un soutien aux patients, quelle que soit leur taille.

DÉMARRAGE ET ARRÊT EN DOUCEUR


Réglez votre chaise sans déranger votre patient grâce à la technologie de démarrage et d'arrêt en douceur.

ATTRAIT ESTHÉTIQUE

Offert avec dossier ergonomique ou étroit, et en styles rembourré ou aseptique, chacun doté d'accoudoirs rembourrés dans un grand choix de couleurs.

SYSTÈME MULTICOUCHE

Quatre couches de mousse spécialisée de diverses densités offrent un confort et un soutien de qualité supérieure pour tous les types de corps.

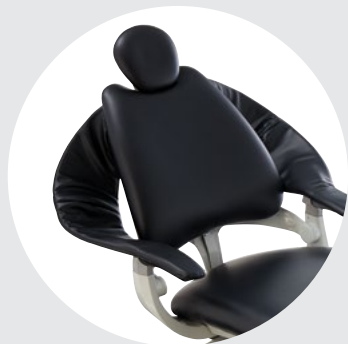


DOSSIER ÉTROIT
ASEPTIQUE




DOSSIER ÉTROIT
REMBOURRÉ



DOSSIER ERGONOMIQUE ASEPTIQUE

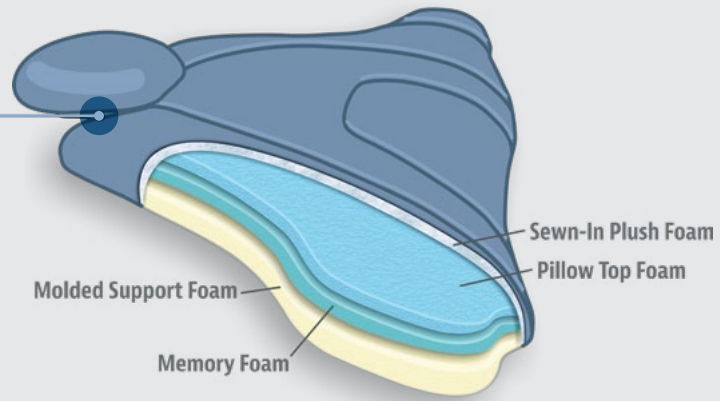

MAGNIFIQUE À L'INTÉRIEUR COMME À L'EXTÉRIEUR

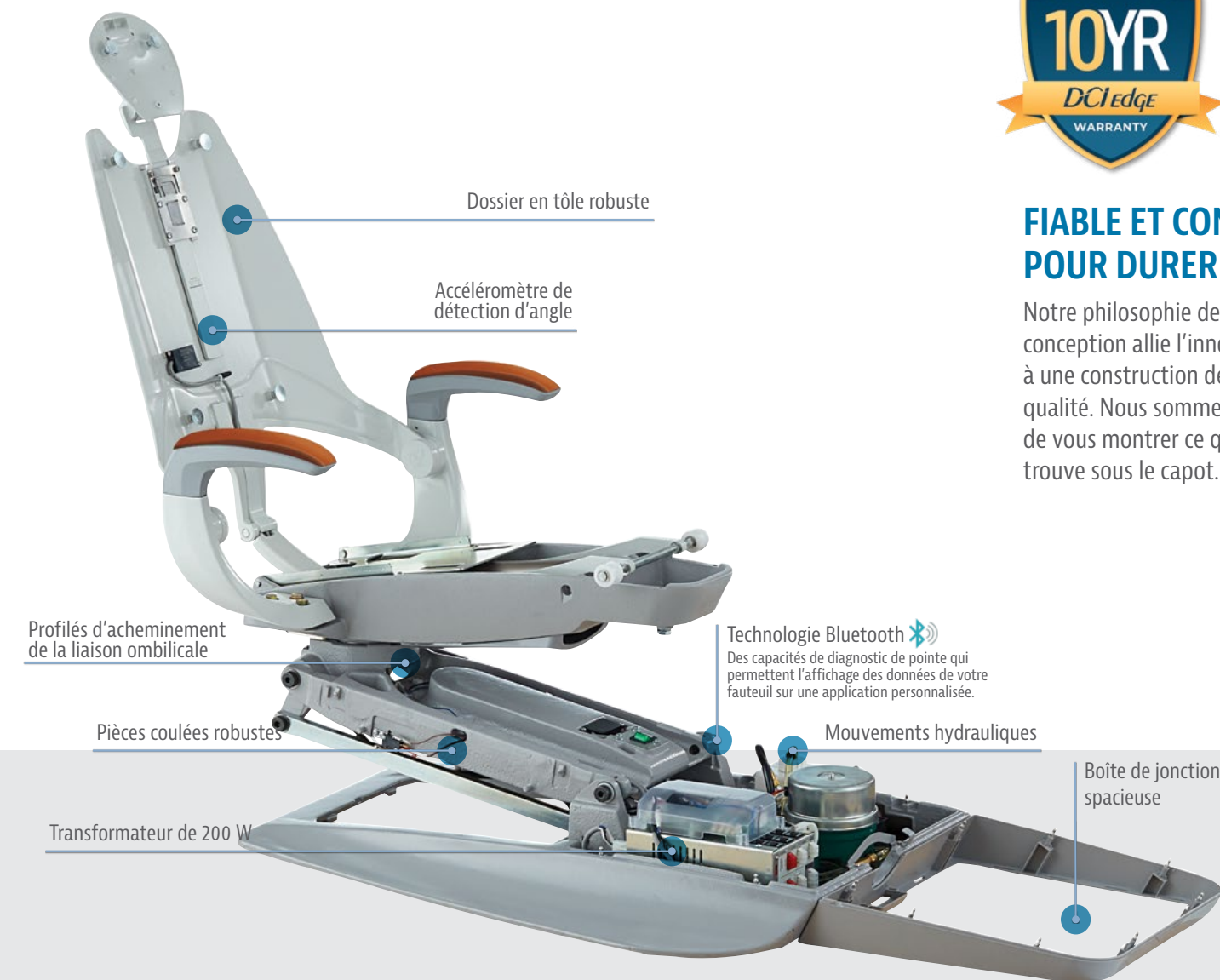

FIABLE ET CONÇU POUR DURER

Notre philosophie de conception allie l'innovation à une construction de haute qualité. Nous sommes fiers de vous montrer ce qui se trouve sous le capot.

LA PERFORMANCE ALLIÉE À LA CONCEPTION

NSK

GARANTIE PROLONGÉE EXCLUSIVE

Demandez des renseignements sur les prix exclusifs et la garantie prolongée NSK de DCI Edge sur divers ensembles d'accessoires pneumatiques et électriques.



INTÉGRÉ ET PRÊT À L'EMPLOI

Accédez facilement aux appareils cliniques et aux appareils de diagnostic essentiels comme le système Dentsply Sirona Cavitron, la gamme de caméras intraorales ACTEON^{MD} SOPRO, des détartreurs piézoélectriques et des lampes à polymériser.

DEUX PAVÉS TACTILES INTÉGRÉS ET POIGNÉES DE FREIN



ACCÈS ERGONOMIQUE AUX INSTRUMENTS

Le pivot de tête supplémentaire tourne pour améliorer l'accès et réduire les mouvements inutiles.



Lumières allumées/éteintes



Retour à la dernière position

01

Boutons programmables pour des positions préréglées



Inclinaison du dossier et fauteuil inclinable vers le haut et vers le bas

COMPOSANTS INTERNES

Des composants pneumatiques fiables et amplement d'espace pour une intégration de haute technologie. En tant que plus grand fabricant de pièces dentaires au monde, DCI est reconnue pour la qualité de ses pièces et composants.



TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

Faites l'expérience d'une conception primée munie de la technologie WAVEONE^{MC}. Le moteur électrique NSK NLZE est conçu avec une puissance supérieure, augmentant considérablement les possibilités de traitement dentaire.



TECHNOLOGIE RÉFLÉCHISSANTE NOVATRICE

UNE VISIBILITÉ ACCRUE

VISIBILITÉ ACCRUE

DCI offre une technologie d'éclairage de pointe en utilisant plus de 500 facettes réfléchissantes pour rediriger la lumière vers la cavité orale. Il en découle un motif lumineux uniforme.

MOINS DE FATIGUE OCULAIRE

La performance lumineuse optimale réduit les ombres et améliore l'éclairage de la cavité orale.

JUMELAGE EXACT DE LA TEINTE

Une température de couleur de 5 000 kelvins avec un indice de rendu des couleurs (IRC) de 90 produit une lumière blanche neutre idéale pour la concordance des couleurs à n'importe quelle intensité.

RÉGLAGE SANS POLYMÉRISATION

Filtre la lumière UV pour prolonger le temps de travail des résines photo-initiées.



CAPTEURS SANS CONTACT PROGRAMMABLES

Contrôlez la lumière sans contact.



PAVÉS TACTILES INTÉGRÉS



Sans polymérisation




Intensité



Marche/arrêt

JUMELAGE EXACT DE LA TEINTE 5 000 K

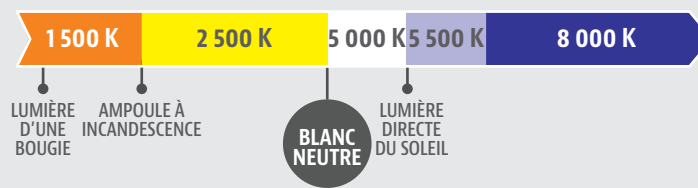

CONFIGURATIONS DE MONTAGE



ÉCLAIRAGE MONTÉ SUR RAIL



ÉCLAIRAGE MONTÉ SUR POTEAU



ÉCLAIRAGE MONTÉ AU PLAFOND



ÉCLAIRAGE MONTÉ AU MUR
(montage sur armoire aussi offert)

SOLUTIONS DE SYSTÈME

FONCTIONNNALITÉ MAXIMALE



SYSTÈME DE TRAITEMENT À SUPPORT PIVOTANT

Le système de traitement et la lampe se déplacent facilement pour une utilisation à gauche ou à droite. Le rayon de pivotement compact optimise l'espace, ce qui le rend idéal pour les salles de traitement de toute taille.



ILLUSTRÉ AVEC CRACHOIR ARRIÈRE



ILLUSTRÉ AVEC CRACHOIR

SYSTÈME DE TRAITEMENT MONTÉ SUR POTEAU

Le système de traitement monté sur poteau est doté d'un piège à vide et d'un système d'eau intégrés, ainsi que de raccords rapides pour l'air et l'eau.



ARMOIRE DE CONCEPTION ÉLÉGANTE POUR COMPLÉTER VOTRE SALLE DE TRAITEMENT


Conçues pour une organisation et une efficacité optimales, les armoires DCI Edge offrent un espace de travail et de rangement idéal, associé à une esthétique moderne élégante. Construction pratique et épurée à un prix qui offre le meilleur rapport qualité-prix pour votre budget.



FAUTEUIL ET
TABOURET
SURFACE SOLIDE
ARMOIRES

REVÊTEMENT ULTRALEATHER CIEL

GLACE MATINALE
HAUT : FRÊNE ARGENTÉ ITALIEN, BAS : FRÊNE STERLING

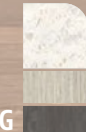



ARMOIRES DCI EDGE

QUALITÉ, FIABILITÉ, ABORDABILITÉ

CONSTRUCTION DE HAUTE QUALITÉ

Le support en acier structural avec sous-base de 6 pouces offre une durabilité accrue tout en soulevant les composants en bois du sol, à l'écart de l'humidité. Les bordures thermoliées rendent les portes et les tiroirs résistants à l'eau et protègent les bords des dommages.

FABRICATION DE PRÉCISION

Conçues avec des logiciels de pointe et découpées avec des machines à commande numérique de pointe, les armoires DCI Edge représentent la qualité au plus haut niveau.

COMPOSANTS FIABLES

Conçues avec des composants haut de gamme qui résistent à l'épreuve du temps.

FONCTIONNELLES ET ABORDABLES

Conçues pour répondre à tous les besoins de la salle de traitement, y compris les unités et les lumières, et ce, à un prix concurrentiel.

SOUCI DU DÉTAIL

Profitez de fonctions détaillées qui rendent les tâches routinières plus efficaces : portes et tiroirs à fermeture en douceur, éviers à montage sous plan faciles à nettoyer après chaque patient et sous-bases en acier thermolaqué résistantes aux nettoyages répétés.

SOLUTIONS COMPLÈTES

Des armoires latérales aux postes de travail 12 heures, en passant par les consoles d'îlot centrales, les postes de stérilisation et les casiers de laboratoire, DCI Edge offre des solutions complètes pour répondre à vos besoins individuels.



FAUTEUIL ET
TABOURET
SURFACE SOLIDE
ARMOIRES

REVÊTEMENT ULTRALEATHER AGRUME

FUMÉE ARGENTÉE

HAUT ET BAS : MAGNOLIA, TOUCHE : TOMBÉE DE LA NUIT



844 854-8555 | dciedge.com

21

LA BEAUTÉ ALLIÉE À LA FONCTIONNALITÉ

Avec les armoires DCI Edge, l'utilité ne compromet pas l'esthétique. Avec l'attention du concepteur à l'attrait visuel, nos armoires offrent un accès ergonomique aux matériaux et aux instruments, un vaste espace de travail pour permettre toute procédure clinique et un espace de rangement optimal. De plus, les unités se règlent facilement pour une utilisation à gauche ou à droite.



ARMOIRE 12 HEURES DE 36 PO
AVEC SYSTÈME DE TRAITEMENT À
MONTAGE SOUS PLAN



ARMOIRE 12 HEURES DE 42 PO
AVEC SYSTÈME DE TRAITEMENT MONTÉ
SUR L'ARMOIRE



ARMOIRE 12 HEURES DE 42 PO
ARMOIRE SUPÉRIEURE PROLONGÉE AVEC
SYSTÈME DE TRAITEMENT MONTÉ AU
PLANCHER À L'ARRIÈRE



CONÇUES POUR L'ORGANISATION ET L'EFFICACITÉ DES CLINIQUES DENTAIRES

CONCEPTION FLEXIBLE

DCI Edge offre une personnalisation modulaire qui s'adapte même aux espaces les plus difficiles et permet d'optimiser l'organisation de la salle de traitement.

COMPATIBLE AVEC LA TECHNOLOGIE

Les modules adaptés à la technologie permettent une intégration facile et efficace des ordinateurs et de la technologie. Conçues pour les bureaux sans papier.

DES SOLUTIONS POUR LA PRODUCTIVITÉ

Les tablettes coulissantes ergonomiques réglables, les bacs basculants, le support d'écran flexible, les prises électriques et USB intégrées et les organisateurs de tiroir colorés vous assurent que tout ce dont vous avez besoin est bien placé et à portée de main.



CONCEPTION INTÉGRÉE VOTRE CHOIX D'OPTIONS

Choisissez la configuration et toute autre option de personnalisation qui vous permettent, à vous et à votre équipe, d'accéder à tout ce dont vous avez besoin sans quitter le fauteuil.

CARACTÉRISTIQUES DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT MONTÉE AU PLANCHER À L'ARRIÈRE

- Convient à l'intégration auxiliaire, maintenant ou à l'avenir
- La hauteur de la surface mobile se règle sur une plage de 3 po
- La conception unique permet un positionnement facile pour les droitiers et les gauchers
- Mouvement latéral de 6 po sans empiètement sur l'espace de l'utilisateur
- L'alignement du piège de récupération et de la bouteille d'eau permet une position pratique pour l'assistant
- Le pavé tactile de l'assistant pivote sur 180 degrés
- Le support de plateau de la surface de travail offre un espace supplémentaire pour les fournitures



CARACTÉRISTIQUES DE L'ARMOIRE AUTOPORTANTE 12 HEURES

- Surface de travail de l'assistant qui peut augmenter sans effort pour l'adapter à n'importe quelle procédure clinique
- Organiseurs de tiroir colorés qui optimisent l'espace de rangement
- Accès ergonomique aux bacs, plateaux, cassettes, matériaux et instruments
- Portes supérieures en verre texturé avec éclairage à DEL
- Tige avec insertions en verre texturé
- Poste d'alimentation à mi-section avec bacs basculants. Deux portes d'accès avec prises doubles dissimulées pour une gestion des câbles propre
- Tablettes ergonomiques pivotantes en acier thermolaqué pouvant contenir bacs et plateaux, ou pouvant servir de surface de travail. Bras robustes en métal moulé qui peuvent supporter jusqu'à 10 lb
- Armoires supérieures standard de 24 ou 30 pouces
- Éclairage de travail à DEL et minuterie
- Distributeurs à gants doubles
- Panneau arrière amovible avec armoire 12 heures autoportante
- Module central inférieur avec rangement pour unité centrale, porte pliante à deux battants et tablette réglable
- Porte pliante à deux battants à ouverture latérale et tiroirs coulissants du module inférieur de l'assistant
- Le support d'écran Easy-Glide peut être installé en haut ou en bas de l'armoire supérieure pour une visualisation pratique
- Découpes supplémentaires pour débitmètre d'azote offertes en option
- Couleurs d'accentuations sur la section centrale



ARMOIRES SIMPLIFIÉES POUR LA STÉRILISATION



POSTE D'EMBALLAGE RABATTABLE

Deux tiroirs bien espacés conçus pour être coulissants et rabattables, offrant amplement d'espace pour emballer des cassettes de toutes tailles.



ACCESSOIRES INTÉGRÉS EN USINE

Nos concepteurs et ingénieurs ont préparé une liste des meilleures options de stérilisation dentaire. L'installation en usine offre un positionnement optimal et un flux de travail fluide.



ORGANISATION STÉRILE SIMPLE

Du rangement coulissant avec support métallique qui peut contenir plusieurs cassettes, bacs, plateaux et instruments enveloppés. Les tablettes réglables permettent une gestion rapide et facile.



DÉCONTAMINATION SYSTÉMATIQUE

Optimisez le flux de travail avec des conteneurs à déchets spécialisés, un évier en acier inoxydable à montage sous plan, deux égouttoirs intégrés et des distributeurs de gants bien placés.



TOURS DE STÉRILISATION CONÇUS POUR DURER

Fabriquées avec des matériaux étanches qui garantissent une protection contre les dommages causés par l'eau. Plusieurs options de tours s'adaptent à vos sélections particulières de stérilisateur.

ÉCLAIRAGE SPÉCIALISÉ POUR UN FLUX DE TRAVAIL VISUEL

Des voyants rouges indiquent un entreposage contaminé alors que des voyants bleus illuminent le matériel stérile. L'éclairage de travail supplémentaire illumine toute la surface de travail pour une visibilité maximale.




DES ARMOIRES SIMPLIFIÉES POUR LE FLUX DE TRAVAIL



RÉCEPTION, NETTOYAGE
ET DÉCONTAMINATION



PRÉPARATION
ET EMBALLAGE

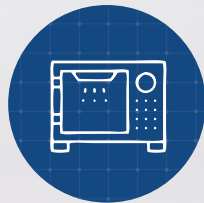

STÉRILISATION



ENTREPOSAGE STÉRILE
ET PRÉPARATION



UN ESPACE DE TRAVAIL CONÇU SPÉCIALEMENT POUR VOUS

La stérilisation est l’une des étapes les plus importantes d’une clinique, et il n’y a jamais une approche unique. Avec DCI Edge, vous pouvez créer un centre de stérilisation qui répond à vos besoins uniques. Toutes les options sont dotées d’un flux basé sur le processus qui maintient la productivité élevée et le risque faible.

STÉRILISATION CONFORME AUX NORMES

Conçu pour respecter les lignes directrices des CDC, en mettant l’accent sur le contrôle des infections et la sécurité des patients.


STÉRILISATION AVEC STYLE

La minuterie entièrement fonctionnelle améliore la productivité, tandis que la cantonnière en acier inoxydable ajoute à la beauté de la conception.


COURSE DROITE




STYLE CUISINE

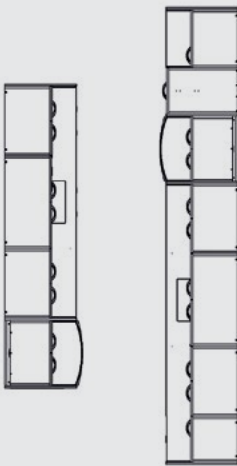

FORME EN L

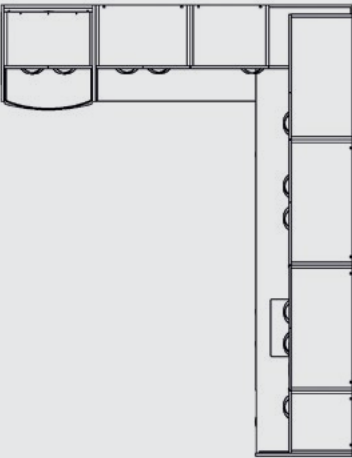

FORME EN U

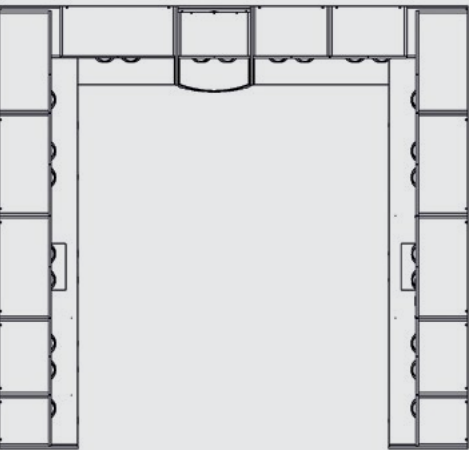



DÉCOUVREZ DCI EDGE

3 SALLES D'EXPOSITION

2 USINES DE FABRICATION



**Salle d'exposition
et installation de
fabrication DCI Edge**
Oregon, É.-U.
120 S Elliott Road
Newberg, OR 97132

**Salle d'exposition DCI
Edge et NSK America**
Siège social
1800 Global Parkway
Hoffman Estates, IL 60192

**Salle d'exposition
et installation de
fabrication DCI Edge**
Caroline du Nord, É.-U.
9201 Stockport Place
Charlotte, NC 28273

dciedge.com
equipment@dcionline.com
1 844 854-8555



50169/Août2023-003
©2023 DCI

