

*DCI* edge

# RESSENTEZ LA PUISSANCE DE L'INTÉGRATION



Systeme de traitement dentaire **Série 5 Plus +** Systeme  
à double micromoteur électrique NSK NLZ PRO

**NSK + DCI** | LA PUISSANCE DU PARTENARIAT

# LA PUISSANCE DU PARTENARIAT

## Une expérience sur laquelle vous pouvez compter

DCI a été fondée il y a plus de 40 ans par la famille Spencer en tant qu'entreprise de pièces d'équipement dentaire, avec pour objectif de fournir des composants à l'ensemble de la communauté dentaire, en mettant l'accent sur la qualité et la valeur à chaque étape. Aujourd'hui, DCI est l'un des plus grands fabricants de pièces d'équipement dentaire au monde et l'un des plus fiables.

Tout au long de son histoire, les principaux fabricants d'équipement et les techniciens de service ont fait confiance aux pièces d'équipement DCI, ce qui a permis à l'entreprise de se forger une solide réputation en matière de fiabilité et de valeur. Avec l'expansion et le lancement de l'équipement dentaire et du mobilier DCI Edge en 2016, la marque DCI Edge est reconnue comme le fabricant d'équipement connaissant la croissance la plus rapide et occupant le deuxième rang en Amérique du Nord.

En 2024, le transfert de propriété de DCI a eu lieu, établissant un partenariat solide entre DCI et NSK. Il en résulte des décennies d'expérience et une culture fondée sur des valeurs communes et une passion pour le dépassement des attentes des clients.



## PLUS FORTS ENSEMBLE

**NSK + DCI**

NSK et DCI Edge. Nos deux marques cumulent plus de 130 ans d'expérience en fabrication et jouissent d'une réputation d'excellence en matière de fiabilité, de savoir-faire et de service. Nous partageons la même volonté de fabriquer des produits de qualité et de soutenir nos clients grâce à des garanties de premier ordre et à un soutien technique hors pair.

# LA PUISSANCE DE L'INTÉGRATION



**Voici le système de traitement dentaire Série 5 Plus avec capacité à double micromoteur NSK NLZ PRO**

Une fusion parfaite de conception raffinée, d'ergonomie améliorée et d'intégration technologique avancée.

## **LE SYSTÈME DE TRAITEMENT DENTAIRE SÉRIE 5 PLUS**

Conçu pour le praticien moderne, le système de traitement dentaire Série 5 **Plus** offre une expérience optimisée, rendant chaque intervention plus efficace et chaque détail plus soigné.

## **DOUBLE MICROMOTEUR ÉLECTRIQUE NLZ PRO INTÉGRÉ**

Profitez d'un fonctionnement fluide à moteur électrique et d'une flexibilité de traitement accrue grâce aux deux micromoteurs.

**Fiabilité. Puissance. Efficacité.**





## Série 5 **Plus**

### **Intégration puissante avec capacité à double micromoteur NSK**

Personnalisez votre système de traitement dentaire DCI Edge Série 5 **Plus** selon vos besoins cliniques grâce à la capacité à micromoteur électrique NSK NLZ PRO simple ou double entièrement intégrée. De plus, choisissez parmi une variété d'options installées en usine pour accéder facilement aux dispositifs cliniques et diagnostiques essentiels.

### **Ergonomie améliorée**

Le système de traitement dentaire Série 5 **Plus** est soigneusement conçu pour favoriser les mouvements naturels et réduire la fatigue physique. Sa conception ergonomique améliore le confort pendant les interventions prolongées, vous permettant de travailler plus efficacement et avec moins de fatigue.

### **Simplicité de conception technique**

Nous misons sur la simplicité dans chaque aspect de la conception de nos produits afin de vous offrir une solution robuste et fiable, alliant performance, prix juste et entretien minimal pendant de nombreuses années.

### **Une qualité sur laquelle vous pouvez compter**

Les produits DCI Edge sont conçus pour résister aux exigences d'un cabinet dentaire achalandé, offrant une durabilité et des performances longue durée, et sont appuyés par notre garantie de 10 ans.

# Intégration technologique

## Deux micromoteurs électriques puissants



### Système à double micromoteur électrique intégré NSK NLZ PRO

Profitez d'une sécurité accrue et d'une efficacité optimale grâce au système à double micromoteur électrique intégré NSK NLZ PRO. La conception compacte est intégrée au système Série 5 **Plus** afin de maximiser votre potentiel de traitement.

### Flux de travail clinique optimisé

Le système NSK NLZ PRO est conçu pour simplifier vos interventions cliniques grâce à ses deux micromoteurs, facilitant la transition du travail à grande vitesse au travail à basse vitesse, vous permettant ainsi de maintenir votre efficacité à chaque étape.

### Optimisation du couple et du contrôle

Avec une vitesse de 100 à 40 000 tr/min, le système NSK NLZ PRO offre un couple 40 % plus élevé que les micromoteurs existants, avec un maximum de 4,2 Ncm.

### Une intégration à portée de main

Intégrez la technologie en toute fluidité pour assurer un flux de travail efficace. Accédez facilement aux dispositifs cliniques et diagnostiques essentiels directement à partir du système de traitement. Compatible avec le détartreur ultrasonique Dentsply Sirona<sup>MD</sup> Cavitron<sup>MD</sup> ou la gamme ACTEON<sup>MD</sup> SOPRO comprenant les caméras intraorales, les détartreurs piézoélectriques et les lampes de polymérisation.

### Traitement endodontique efficace

Les fonctions rotative et alternative permettent un traitement endodontique efficace. Elles sont compatibles avec les limes endodontiques alternatives de Dentsply Sirona Endodontics : WaveOne Gold<sup>MD</sup>, WaveOne<sup>MD</sup> et RECIPROC<sup>MC</sup>.





PJT606


Électrique haute vitesse Z95L

PJT608

Électrique à basse vitesse Z25L

## Ensembles exclusifs de pièces à main

Plus de 10 ensembles exclusifs parmi lesquels choisir, incluant des pièces à main pneumatiques basse et haute vitesses, des pièces à main électriques basse et haute vitesses, des pièces à main prophylactiques basse vitesse et le système iCare.

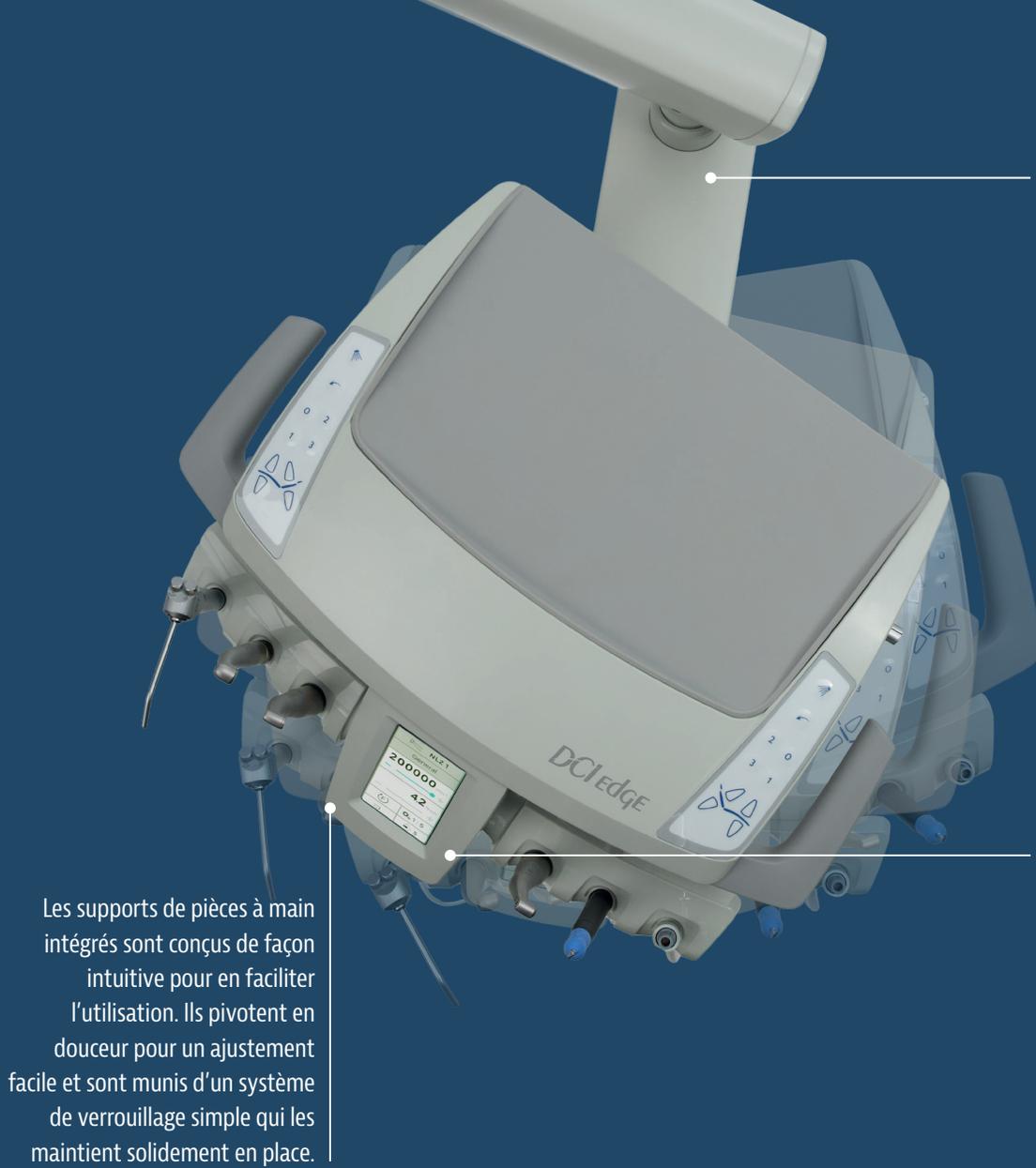

Le double point de pivotement permet un positionnement sans effort de la tête de l'unité.

Conception raffinée qui complète les unités de traitement DCI Edge existantes. Tête de commande élargie pouvant accueillir un plateau pleine grandeur.

Mise à niveau d'intégration pour la compatibilité à double micromoteur électrique.

Les supports de pièces à main intégrés sont conçus de façon intuitive pour en faciliter l'utilisation. Ils pivotent en douceur pour un ajustement facile et sont munis d'un système de verrouillage simple qui les maintient solidement en place.

## Simplicité de conception technique



Les valves combinées d'eau, positionnées vers l'avant, sont stratégiquement inclinées pour en faciliter l'identification et le réglage.

Composants fiables et espace accru pour l'intégration de dispositifs supplémentaires. En tant que plus grand fabricant de pièces dentaires au monde, DCI est reconnue pour la qualité de ses pièces et composants.

La gestion organisée des tubulures et des câbles permet de garder votre installation propre et dégagée.



# Ergonomie améliorée



Le bras flexible amélioré soutient le poids supplémentaire des nouvelles technologies. Il est plus grand, plus robuste et plus performant que jamais.

L'écran tactile du système NSK NLZ PRO offre une visibilité optimale ainsi qu'une utilisation facile et accessible des commandes.



Le concentrateur USB intégré au système de traitement permet de garder les instruments connectés et alimentés.

Double pavé tactile intégré et poignées de frein à prise souple.


- Quatre positions de fauteuil programmables.
- Réglage manuel de la montée du fauteuil et de l'inclinaison du dossier.
- Commandes de retour à la dernière position.
- Commande de l'éclairage dentaire.
- Accès des deux côtés.



Le support de plateau à bras mobile est positionné au-dessus du système de traitement, offrant un meilleur accès et un espace de travail supplémentaire.

Manomètre externe.

Réglage de l'air de soufflage.

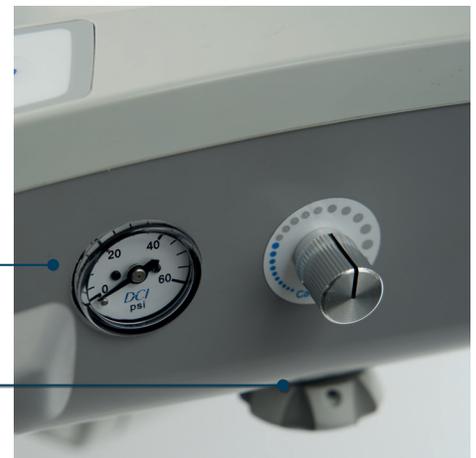

Interrupteur marche/arrêt et interrupteur de rinçage.

Nouveau support de pièce à main intégré avec réglage de rotation sans outils.



# Configurations complémentaires



Support pivotant

## Luminaire Série 5

DCI offre une technologie d'éclairage de pointe en utilisant plus de 500 facettes réfléchissantes pour rediriger la lumière vers la cavité buccale. Le résultat est un motif lumineux uniforme qui améliore la visibilité pour les dentistes et les assistants dentaires.

- Fonctionnement mains libres
- La performance lumineuse optimale réduit les ombres et améliore l'éclairage de la cavité buccale
- Une température de couleur de 5 000 kelvins avec un indice de rendu des couleurs (IRC) de 90 produit une lumière blanche neutre
- Réglage sans polymérisation

## Fauteuil dentaire Série 5

Ce n'est pas pour rien que le fauteuil dentaire Série 5 est notre modèle le plus populaire. Élégant, sophistiqué et doté de toutes les fonctionnalités essentielles et supplémentaires dont vous avez besoin, il devient rapidement l'option privilégiée des dentistes partout au pays.

- Capacité de charge de 550 lb
- Élévation hydraulique du fauteuil et inclinaison du dossier
- Coussin dorsal innovant et appui-tête profilé
- Fonction de démarrage et d'arrêt en douceur
- Option de technologie de massage AirSoothe<sup>MC</sup>
- Offert avec dossier ergonomique ou étroit, et en styles rembourré ou aseptique
- Couches multiples de mousse spécialisée



Montage sur poteau



Système de traitement latéral

## Armoires dentaires

Conçues pour le domaine dentaire et pour votre budget, les armoires dentaires DCI Edge sont durables et offrent des caractéristiques adaptées à un cabinet dentaire, à un prix concurrentiel comparé aux fabricants locaux d'armoires.

- Les armoires latérales sont offertes dans une variété de hauteurs, de longueurs et de largeurs afin de personnaliser facilement votre salle de traitement.
- Nos armoires sont des équipements sérialisés, admissibles aux déductions fiscales de la section 179 et à l'amortissement accéléré, ce qui peut représenter des économies d'impôt importantes\*.
- Offertes en 32 finis stratifiés et 20 couleurs unies, toutes au même prix standard.

\*Consultez votre conseiller fiscal pour obtenir des conseils sur les déductions fiscales applicables aux achats admissibles.

# Une qualité sur laquelle vous pouvez compter



**Conçus et fabriqués aux États-Unis :** Tout l'équipement et toutes les armoires DCI Edge sont fièrement conçus et assemblés aux États-Unis. Nos produits sont conçus, élaborés et assemblés dans nos installations à partir de composants DCI de haute qualité, ce qui nous permet d'offrir une qualité exceptionnelle à nos clients.

**Efficacité et valeur :** Nous utilisons un modèle d'affaires allégé et efficace qui nous permet d'offrir des produits mettant l'accent sur les caractéristiques les plus appréciées par les clients, tout en maintenant une qualité exceptionnelle et un prix abordable. De plus, nous nous efforçons de réduire la complexité dans chaque aspect de la conception de nos produits, ce qui se traduit par une ingénierie simplifiée et efficace qui profite à nos clients tout au long de la durée de vie de leur investissement.

**Tranquillité d'esprit inégalée pour la clientèle :** Pour soutenir votre succès et vous offrir une tranquillité d'esprit, nous sommes fiers d'offrir une garantie de 10 ans sur tout notre équipement. De plus, notre équipe dévouée d'experts en équipement est à votre disposition pour vous aider avec tout besoin de dépannage. Nous nous engageons à vous accompagner bien au-delà de l'installation, afin que vous puissiez compter sur DCI pendant toute la durée de vie de votre équipement.



**Trois emplacements DCI Edge, idéalement situés dans plusieurs fuseaux horaires.**

Nous offrons des visites VIP sur place à chacun de nos emplacements ou en mode virtuel.

**OREGON, É.-U.**

Salle d'exposition  
Installation de fabrication

120 S Elliott Road  
Newberg, OR 97132

**CAROLINE DU NORD, É.-U.**

Salle d'exposition  
Installation de fabrication

9201 Stockport Place  
Charlotte, NC 28273

**ILLINOIS, É.-U.**

Salle d'exposition  
Siège social nord-américain de NSK

1800 Global Parkway  
Hoffman Estates, IL 60192



**Siège social de DCI**

705 S Springbrook Road, Newberg, OR 97132  
equipment@dcionline.com | 1 800 624-2793  
Du lundi au vendredi, de 5 h à 17 h (HP)

   | [dciedge.com](https://www.dciedge.com) | 50286/Mai-2025-001/AS

« CONCEVOIR LE  
CABINET DENTAIRE

